

**Schaffen Sie mehr mit Schallenergie.**  
Erfreuen Sie sich am Können von SonicFill™ 3!



**SonicFill™ 3**

SingleFill™ -Kompositsystem

**Schritt 1** SonicFill™ 3 applizieren und modellieren.  
**Schritt 2** Es gibt keinen zweiten Schritt.

Das neue, fortschrittliche SonicFill 3 SingleFill™-Kompositsystem ist das branchenweit erste schallaktivierte Bulk-Fill-Kompositsystem, das Sie qualitativ hochwertige Restaurationen einfacher und schneller legen lässt, als dies mit der herkömmlichen Schichttechnik möglich ist.

Erzielen Sie langlebige Restaurationen in nur einem Schritt.

**KAVO**  **Kerr**


# Gestützt durch 125 Jahre Expertise

In den letzten 10 Jahren hat das SonicFill-System von Kerr Tausenden von Zahnärzten weltweit ermöglicht, qualitativ hochwertige Seitenzahnrestaurationen mit einem einfach anzuwendenden SingleFill-Verfahren zu legen, das die Vorteile eines fließfähigen und modellierbaren Komposits vereint. Der Schlüssel zum Erfolg war die einzigartige schallaktivierte Technologie. Diese Technologie kombiniert das exklusive materialwissenschaftliche Wissen von Kerr mit der innovativen Nutzung von Schallenergie, aus dem Know-How von KaVo im Bereich der Handstücke. Das Ergebnis ist ein revolutionäres Produkt, mit dem Zahnärzte die Behandlungszeit verkürzen und gleichzeitig die klinischen Ergebnisse sowie die Erfahrung von Patienten verbessern können.




## Einzigartige, patentierte Technologie

Das Geheimnis von SonicFill liegt in dem hoch gefüllten, patentierten Komposit mit speziellen Modifikatoren. Diese reagieren auf die Schallenergie, die das Handstück verursacht. Bei Anwendung von Schallenergie nimmt die Viskosität (um bis zu 84 %) ab, sodass das Komposit schnell eingebracht und präzise an die Wände der Kavität adaptiert werden kann. Wird die Schallenergie gestoppt, kehrt das Komposit zu einem viskoserem, formstabilen Zustand zurück, der sich optimal zur Modellierung und Konturierung eignet.

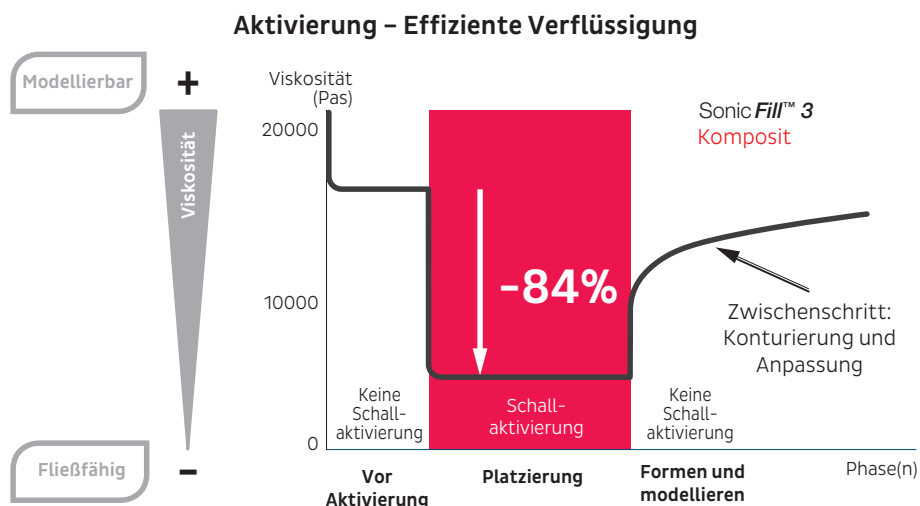

# Die besten Vorteile eines fließfähigen und modellierbaren Komposits in einem

Das neue SonicFill™ 3 ist das einzige schallaktivierte Bulk-Fill-Komposit, das sich beim Einbringen der Füllung wie ein fließfähiges Komposit verhält und sobald die Schallenergie gestoppt wird, sich wie ein nicht klebriges, modellierbares Komposit verhält.

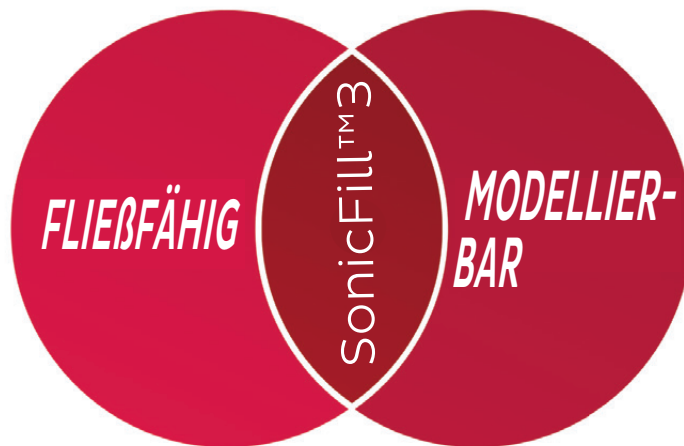

## Die Hauptvorteile FLIESSFÄHIGER Komposite


- Bessere Adaptation an Innenwände und Randbereiche
- Rasche Einbringung
- Geringer Schrumpfstress

## Die Hauptvorteile MODELLIERBARER Komposite

- Einfachere Handhabung
- Herausragende mechanische Eigenschaften
- Ohne Liner und ohne Deckschicht

## Je weniger Schritte, desto geringer das Fehlerrisiko


SonicFill™ 3 ersetzt konventionelle, zeitaufwändige, mehrschrittige Schichttechniken durch ein SingleFill-Kompositsystem, bei dem weder ein Liner platziert noch eine abschließende Deckschicht aufgebracht werden muss.

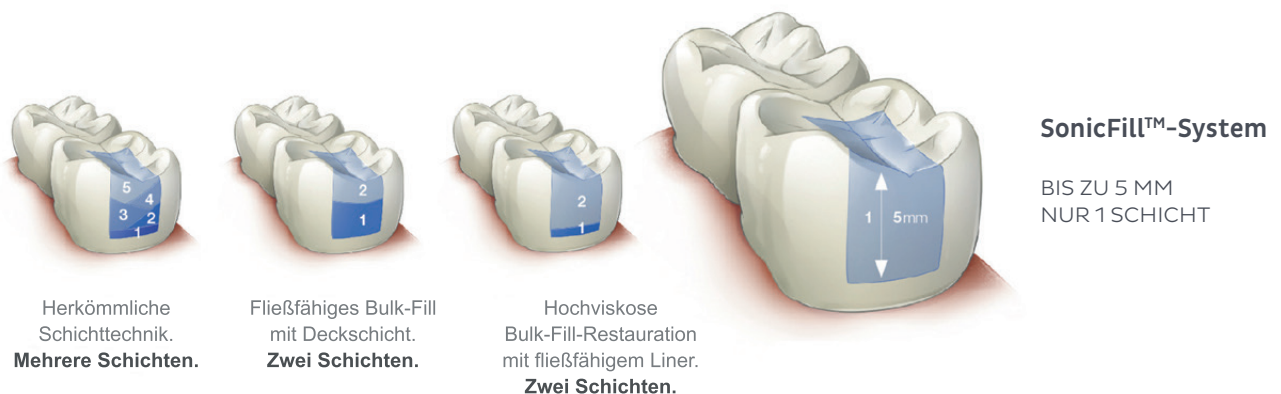

# Nachgewiesene Ergebnisse. Ein Schritt weiter als die anderen

## Schrumpfstress


SonicFill™ 3 weist einen geringeren Schrumpfstress auf als Filtek™ One Bulk Fill und Tetric EvoCeram® Bulk Fill.

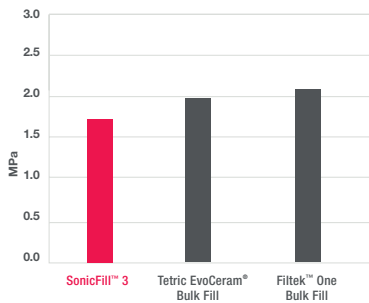

\*Schrumpfstress nach 2 Minuten


## Biegefestigkeit

SonicFill™ 3 besitzt eine höhere Biegefestigkeit als SDR® Flow+ und Tetric EvoCeram® Bulk Fill.\*

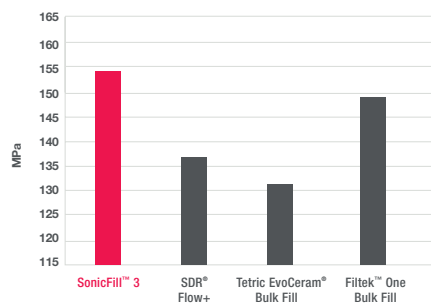

## Konversionsgrad

Bei einer Dicke von 5 mm zeigte SonicFill™ 3 im unteren Teil eine Härte von 86,6 % im Vergleich zum oberen Teil.\*

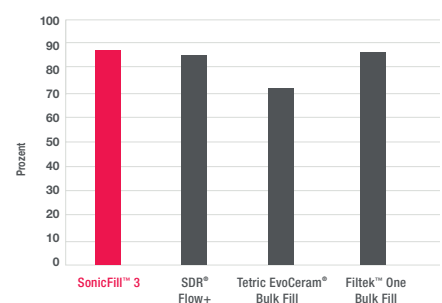

\* Interne Daten

\* Daten auf Anfrage

## Langlebige, hochwertige Restaurationen - jetzt noch schneller


Das Anfertigen von langlebigen Restaurationen war nie schneller oder effizienter. Das neue fortschrittliche SonicFill™3 mit seiner verbesserten Adaptation unterstützt Zahnärzte, Restaurationen einfacher und präziser durchzuführen und dabei vorhersehbarere und zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen.

SonicFill™ 3 dient zum direkten Füllen aller Kavitätsklassen im Front- und Seitenzahnbereich. Es ist darüber hinaus für Stumpfaufbauten indiziert (eine vollständige Liste der Indikationen ist in der Gebrauchsanweisung enthalten).

### Ersetzen von altem Amalgam durch SF3



### Grosse Klasse II Kavität mit SF3

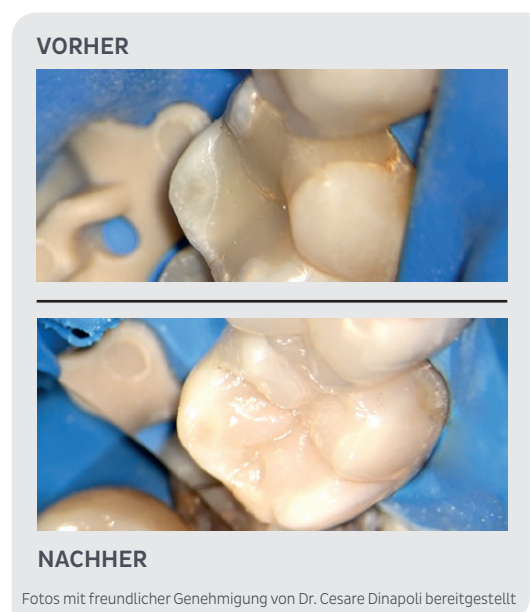

# Leistungssteigerung um 3 Schritte

Das SonicFill™ 3-Bulk-Fill-Kompositsystem verwandelt mühsame, repetitive Seitenzahnrestaurationen in ein einfaches und zuverlässiges SingleFill-Verfahren. Das neue, fortschrittliche SonicFill™ 3 verfügt über eine **verbesserte Adaptationseigenschaft** und ist **leichter zu handhaben und zu modellieren** und **kann während des Legens einfacher eingebracht werden** als Vorgängerprodukte. Die Vorteile sind kürzere Patiententermine, planbarere Ergebnisse und zuverlässige, langlebige Restaurationen.


# 1

## ZUVERLÄSSIG



### Zuverlässige Anwendung

Die deutliche Reaktion auf Schallenergie, die mit dem exklusiven KaVo-Handstück angewendet wird, verringert die Viskosität des Nanohybrid-Komposits von Kerr um bis zu 84 %. Das ermöglicht eine optimale Adaptation für verlässliche und planbare Restaurationen.

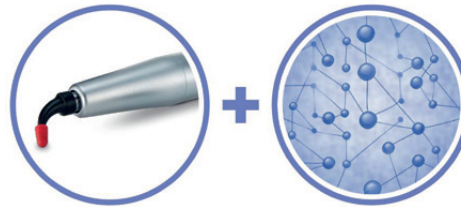

# 2

## KÜRZER



### Kürzeres Verfahren

SonicFill 3 verwandelt mühsame, repetitive Seitenzahnrestaurationen in ein einfaches und zuverlässiges SingleFill-Verfahren: Es können Kavitäten mit einer Tiefe von bis zu 5 mm in nur einem Schritt und mit nur einem Material gefüllt werden – Liner und Deckschicht sind nicht erforderlich.

Ergonomisch geformte Spitzen ermöglichen den einfachen Zugang zur Kavität.



# 3


## SICHER



### Lang anhaltende Leistung

Hoher Fülleranteil (81 % nach Gewicht).

Ein geringerer Schrumpfstress ermöglicht eine herausragende Randdichtigkeit und reduziert Hohlräume und Lücken im Komposit auf ein Minimum; zusätzlich zu seinen hervorragenden mechanischen Eigenschaften, wie eine ausgezeichnete Abrasions- und Biegefestigkeit für langlebige Füllungen.

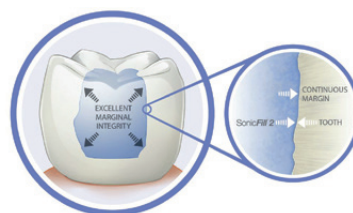

# Bleiben Sie auf dem Laufenden

Vielseitige Produkte, vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten. Es gibt viele Wege, mit Kerr Dental in Verbindung zu bleiben und über unsere Neuigkeiten und Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.



## Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

Über unsere Kanäle in den sozialen Medien



## Erfahren Sie Neuigkeiten

Durch Registrierung für unseren Newsletter



## Sprechen Sie mit uns

Über unsere lokalen Vertreter



## Erfahren Sie, was es Neues gibt

Durch einen Besuch auf unserer Website

BIO-MKT-SS-002\_Rev.00

## Testen Sie das SonicFill™ 3 SingleFill-Kompositsystem in Ihrer Praxis

### Bestellinformationen

#### SonicFill™3 Einführungsakit

Das Einführungsakit ist eine ideale Möglichkeit, um SonicFill 3 kennenzulernen. Es enthält ein SonicFill-Handstück, ein Starterkit, eine Gebrauchsanleitung und insgesamt 60 Unidose-Spitzen: 30 Unidose-Spitzen in A3, 20 Unidose-Spitzen in A2 und 10 Unidose-Spitzen in A1.

36715 SonicFill™3 Einführungsakit

#### SonicFill™3 Unidose-Nachfüllpackung

Jede Nachfüllpackung enthält 20 Unidose-Spitzen à 0,25 g

36711 SonicFill™3 Komposit A1

36712 SonicFill™3 Komposit A2

36713 SonicFill™3 Komposit A3

36714 SonicFill™3 Komposit B1

#### Handstück und Zubehörteile

1.007.7400 SonicFill™-Handstück

0.553.1210 MultiFlex-Kupplung 457



Kerr GmbH | Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Deutschland

Kerr Hawe SA | Via Strecce 4 | 6934 Bioggio | Schweiz

KAVO Kerr