

Entdecken Sie eine neue Endo-Welt mit VDW.CONNECT Drive®

Ihr kabelloser Endomotor



ENDO
EASY
EFFICIENT

vdw-dental.com

 **VDW®**





VDW.CONNECT

Smarte Endogeräte für den modernen Lifestyle

VDW.CONNECT kombiniert moderne Kommunikationstechnologie mit leistungsstarker Performance. Der innovative kabellose Endomotor VDW.CONNECT Drive® bietet Ihnen sowohl Mobilität als auch einfache Handhabung. Nutzen Sie die Grundfunktionen oder greifen Sie über die VDW.CONNECT App flexibel auf ein breites Spektrum an praxisrelevanten Anwendungen zu.

Bewegungsfreiheit, intuitive Bedienung und individuelle Profile bieten ein Höchstmaß an Flexibilität und Effizienz.

Das innovative Konzept begleitet Sie in die Zukunft:

VDW.CONNECT ist updatefähig und modular um Funktionen und Services erweiterbar. Damit bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand.

VDW.CONNECT Drive®

Performance meets Mobility

Flexibler Einsatz

Sie haben die Wahl:
Setzen Sie VDW.CONNECT Drive® ohne App oder App-
gestützt via Bluetooth ein.

Hohe Motorleistung

Mit einer Antriebsstärke bis zu 5 Ncm kann sich
VDW.CONNECT Drive® mit den führenden
VDW RECIPROC®-Motoren messen.

Komfortables Arbeiten

Die Form folgt der Funktion. VDW.CONNECT Drive® wurde
nach ergonomischen Gesichtspunkten gut ausbalanciert.
Das kabellose Handstück sorgt für Bewegungsfreiheit, das
drehbare Winkelstück mit kleinem Kopf für ein erweitertes
Sichtfeld und einen bequemen Zugang.

Lange Laufzeit

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu
16 Behandlungen in Folge.



OHNE APP

Für die einfache Aufbereitung mit RECIPROC® *blue*

Der einzige kabellose Motor für RECIPROC® *blue* ohne App

- Steuerung direkt am Handstück ohne iPad.
- RECIPROC® *blue* – mit nur einem Instrument ist selbst die Aufbereitung eines komplexen Wurzelkanals eine lösbare Aufgabe. Keine aufwändigen Instrumentenwechsel oder zeitraubenden Arbeitsschritte mehr.
- RECIPROC REVERSE-Komfortfunktion: Der Zwei-Stufen-Indikator signalisiert bereits früh eine erhöhte Belastung auf das Instrument und unterstützt so besonders Neuanwender.



 **RECIPROC®** *blue*



Einfach – Sicher – Hochflexibel
www.reciproc.com

APP-GESTÜTZT

Für die Aufbereitung mit rotierenden und reziproken Feilensystemen

Mit der App-Anwendung werden die VDW.CONNECT Drive® Grundfunktionen um viele praxisrelevante Optionen erweitert:

- Vorprogrammierte Feilensysteme einfach auswählen
- Instrumenten-Einstellungen bei Bedarf ändern
- Instrumente als Favoriten festlegen
- Eigene Sequenzen erstellen
- Persönliche Benutzerprofile mit nur wenigen Klicks anlegen

In der Anwendung ist VDW.CONNECT Drive® so einfach wie sicher.

Die Funktionen Auto-Stopp-Reverse bei Erreichen der Drehmomentgrenze und RECIPROC REVERSE geben Ihnen zusätzlich einen hohen Sicherheitskomfort.

Eine Investition, die sich lohnt:

VDW.CONNECT Drive® ist um weitere, zukünftige Funktionen modular erweiterbar und updatefähig.

VDW.CONNECT App

Die VDW.CONNECT App konzentriert sich auf die wesentlichen Funktionen und Informationen, die Sie für eine erfolgreiche Aufbereitung brauchen. Die intuitive Bedienung und personalisierte Voreinstellungen unterstützen Sie dabei, Ihren Endo-Workflow noch effizienter zu gestalten.

Home

- Navigationsleiste:
 - Direkter Link zu VDWuser.net
 - Anlegen von persönlichen Benutzerprofilen
 - Schneller Zugriff auf elektronische Gebrauchsanleitung* und Einstellungen
- Bedienfeld:
 - Tasten zur Auswahl vorgespeicherter Feilensysteme
 - Tasten zum Anlegen eigener Feilensequenzen und Instrumente
 - Shortcuts zu angelegten Favoriten
- Statusleiste:
 - Permanente Kontrolle über aktuellen Verbindungs- und Akkustatus des verbundenen Gerätes



Die wesentlichen Informationen auf einen Blick:

- Klare Darstellung
- Große Instrumenten-Abbildungen mit ISO-Farbcodierung für mehr Anwendersicherheit




kostenloser Download
im App Store inkl. kostenlose Updates
auf zukünftige Funktionserweiterungen

* In Ländern, deren gesetzliche Rahmenbedingungen uns die Möglichkeit bieten, verzichten wir der Umwelt zuliebe auf eine Druckversion der Gebrauchsanleitung. iBooks muss installiert sein, um die Gebrauchsanleitung lesen zu können. Falls iBooks nicht auf dem iPad installiert ist, kann die iBooks App im App Store heruntergeladen werden.

Die elektronische Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.vdw-dental.com/manuals.

Die VDW.CONNECT App ist kompatibel mit iPad mini sowie iPad mit Bluetooth 4.0 low energy. Ihre iOS Version darf nicht niedriger sein als 8.0.

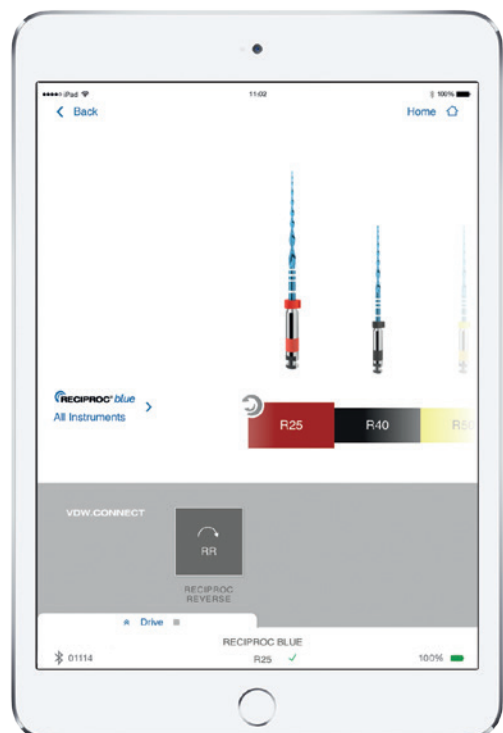

Die aktuelle Version der VDW.CONNECT App kann leicht von den abgebildeten Screenshots auf dieser Seite abweichen.

Produktpalette

■ VDW.CONNECT Drive® _____ V04 1183 000 000

- Inkl. 6:1 Winkelstück und Handstückablage

■ VDW.CONNECT Accessories for iPad mini _____ V04 1185 000 550

- Ständer mit Schale für iPad mini
- 5 Einmalhüllen für iPad mini

■ VDW.CONNECT Drive® Set _____ V04 1183 000 500

- VDW.CONNECT Drive®
- VDW.CONNECT Accessories for iPad mini

■ VDW.CONNECT Drive® Set Medium *blue* _____ V04 1181 025 624

- VDW.CONNECT Drive®
- RECIPROC® *blue* System Kit 24:
 - 24 RECIPROC® *blue* Instrumente (25 mm), steril, 12 × R25, 6 × R40, 6 × R50
 - 180 RECIPROC® *blue* Papierspitzen, sortiert, steril, 60 × R25, 60 × R40, 60 × R50
 - 60 RECIPROC® *blue* Guttapercha Stifte, sortiert, 36 × R25, 12 × R40, 12 × R50
 - 1 Endo-Übungszahn, trepaniert
 - Anwenderkarte, Broschüre, Gebrauchsanweisung

Zubehör für VDW.CONNECT Drive®

■ 6:1 Winkelstück _____ V04 1185 000 504

■ Handstück Einmalhüllen, 100 Stück _____ V04 1185 000 503

■ Einmalhüllen für iPad mini, 100 Stück _____ V04 1185 000 507

■ Ladegerät inkl. Länderadapter _____ V04 1185 000 501

■ Sprayadapter für manuelle Ölpflege _____ V04 1185 000 506

■ Winkelstückaufsatz für Assistina _____ V04 1185 000 511
(geeignet für W&H
REF 06037100)



Für weitere Informationen zu VDW.CONNECT Drive®
kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Händler oder
besuchen Sie uns auf www.vdw-dental.com

VDW GmbH
Bayerwaldstraße 15
81737 München
Tel. +49 89 62734-0
Fax +49 89 62734-304
info@vdw-dental.com